

\*2015 年 6 月 1 日 改訂 (第 2 版)  
2013 年 6 月 1 日 作成 (新様式第 1 版)

医療機器届出番号: 13B1X10109000217

機械器具 70 歯科用鋳造器  
一般医療機器 歯科技工用金属表面加工器  
JMDN コード: 70755000


## ロカテック™ ジュニア

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 概要

圧縮空気を使用して、ロカテック™ サンドを噴射することにより、補綴物の表面を処理する。本体とフットスイッチとハンドピースから成り立っている。

#### 2. 外観図

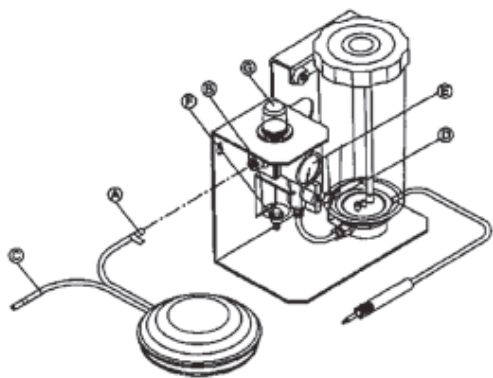

### 【使用目的、効能又は効果】

補綴物の表面加工に用いる。

### 【品目仕様等】

- 寸法: 幅 220mm×奥行 130mm×高さ 260mm
- 重量: 約 2.2kg

### 【操作方法又は使用方法等】

取扱説明書の「2.設置」、「3.ロカテック™ システム」を参照。

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- 可燃性、引火性、爆発性の液体やガスの近くで使用しないこと。
- 正常かつ安全に作動することを確認し、後述の方法に沿って、保守点検を行うこと。
- 故障した場合は、訓練を受けた有資格者以外は、修理をしないこと。修理は専門家に依頼すること。故障した状態のまま、使用しつづけないこと。
- 故障などで部品を取り替える際には当社品を使用すること。他社品を使用した場合、保証の限りではありません。
- 修理前には圧縮空気との接続を解除すること。
- 溶剤入りのクリーニング剤は使用しないこと。プラスチックが損傷し、爆発の危険性があります。
- 壁に据え付ける場合は、専門家が適切なネジを用いてきちんと調整すること。
- 本品を気温の低い場所から移動した場合は、室温に達するまで使用しないこと。
- フットスイッチは付属の専用スイッチのみを使用すること。
- 口腔内で使用しないこと。
- 本品での作業中は、適切な保護めがねを着用すること。

12) 手または身体に粉末を吹き付けないこと。けがをする恐れがあります。

13) 本品はバキュームと共に使用すること。粉末を吸い込まないよう適切な対策を施すこと。

14) 本品を使用する前にタンクの蓋をしっかりと締めること。

#### 2. その他の注意

- 取扱説明書の「注意事項」、「使用上の注意」及び各項に記載の注意事項を参照すること。
- 本品は表記以外の用途に使用しないこと。
- 本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 廃棄する場合は、地方自治体の条例または規則に従うこと。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

#### 1. 貯蔵・保管方法

- 保管場所については次の事項に注意すること。

- (1) 水のかからない場所に設置すること。
- (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- (3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む。）などを避けて、安定状態にて保管すること。
- (4) 本品に悪影響を生じる恐れのない場所にしっかりと設置すること。また横向きや逆さ向きに設置しないこと。
- (5) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所には保管しないこと。
- (6) 使用する圧縮空気の湿度・温度に十分注意すること。結露が生じた場合は、正常に噴射しなくなる恐れがあります。

- 2) 長期保管した時は、使用前に始業点検をすること。

#### 2. 耐用期間

7 年 [自己認証 (製造元データによる)]

但し、これは保守点検が行われ、適切な環境で使われた場合で、使用状況により変わります。

### 【保守・点検に係る事項】

取扱説明書の「4.器械のメンテナンス」を参照。

### 【包装】

本体、フットスイッチ、ハンドピース、継手類一式: 各 1

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### 製造販売業者

#### \* 名称: スリーエム ジャパン株式会社

<http://www.mmm.co.jp/hc/dental/>

TEL: 0120-332-329 (3M ESPE コールセンター)

#### 外国製造所の国名及び製造業者の名称

ドイツ、3M ドイツ社 (3M Deutschland GmbH)

ロカテックは 3M 社またはその関連会社の商標です。

保証: 品質不良が明らかにされた場合は、同数量の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

**取扱説明書を必ずご参照下さい。**